



# RECHERCHE DE SANG DANS LES SELLES FICHE DE PRÉCONISATIONS

Nom de naissance : \_\_\_\_\_

Nom : \_\_\_\_\_

Prénom : \_\_\_\_\_

Date de naissance : \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Matricule : \_\_\_\_\_

E-mail : \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_

00/+ \_\_\_\_\_

Cadre réservé  
au laboratoire

Prélèvement

Date : \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 20\_\_\_\_


Heure : \_\_\_\_ h \_\_\_\_




**01.**  
Urinez **avant** de débuter le recueil (il ne faut pas que les selles soient ensuite en contact avec de l'urine)



**02.**  
Collez le papier de recueil des selles sur la lunette des toilettes à l'aide des autocollants

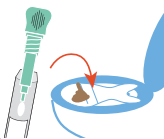


**03.**  
Une fois les selles émises, ouvrez le tube en tournant le bouchon vert

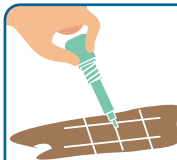

**04.**  
Grattez « en quadrillage » la surface des selles à plusieurs endroits à l'aide de la tige verte



**05.**  
La partie striée de la tige doit être recouverte de selles

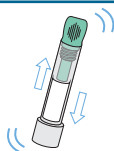

**06.**  
Refermez bien le tube et secouez-le énergiquement



**07.**  
Notez **vos Nom et Prénom** sur le tube et complétez la fiche. Glissez le tout dans le sachet puis scellez-le



Trouvez un centre  
bionext.lu/centres

**08.**  
Rapportez le sachet dans l'un de nos centres en respectant le délai de conservation ci-dessous

## CONSERVATION DU PRÉLÈVEMENT



+20°C  
Max 6j



+4°C  
Max 24h



Gagnez du temps,  
**pré-inscrivez-vous**